

CABESTRILLO ESPUMA HEMIPLÉJICO DERECHO O IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Cabestrillo para la sujeción del brazo compuesto por una base que se sitúa en el brazo y va sujeta con dos cintas.

REFERENCIA INTERNA	MODELO	EAN13
2650865	IZQUIERDO	8426828508658
2650866	DERECHO	8426828508665

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

Para la sujeción del brazo:

- Reduce la subluxación gleno-humeral.
- Ayuda a evitar dolores de espalda y pseudo-distrofia.

CARACTERÍSTICAS

- Composición:
 - Base y cintas de espuma-velour: poliamida 100%
 - Ribete: poliéster 100%
 - Hebillas de plástico y cierre de contacto.
- Partes del cabestrillo:
 - Base donde poner el brazo.
 - 2 cintas superiores con hebilla y cierre de contacto.
 - Cinta que une las hebillas.
- Dos modelos: brazo izquierdo y derecho.

MODO DE USO

- Colocar las tiras de modo que la parte ancha del cabestrillo quede encima del hombro, del brazo a sujetar.
- Colocar la mano y muñeca en la bolsa del cabestrillo.



- Hacer pasar la tira de sujeción por la axila del brazo contrario y por encima del brazo a sujetar.
- Ajustar la tira de sujeción sin apretar en exceso.

PRECAUCIONES


- No utilizar sobre heridas abiertas.
- Antes de colocar definitivamente, comprobar que las tiras elásticas tienen la medida correcta.
- La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo.
- El cuello humeral tiene que quedar convenientemente apoyado.
- Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas.
- Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo de cabestrillo.
- Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover los dedos con regularidad para favorecer la circulación.
- Comprobar a diario la piel de debajo del cabestrillo, en especial la axila, para asegurar que se mantiene en buen estado.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

CONSERVACIÓN

- Lavar en agua templada de máximo 40 Cº.
- No usar lejía.
- Se puede secar en secadora.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria

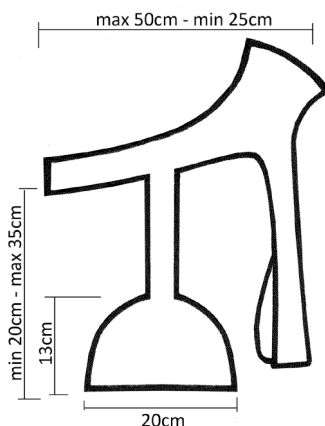

Pol. Can Calderón - Avda. Marina, 56 A
08830 Sant Boi de Llobregat – Barcelona
Tel: 934 902 946 – Fax: 934 900 096
www.fleming-sa.com – fleming-sa@fleming-sa.com

